



## Vacuklav 44B+ Evolution


Die Autoklaven der Evolution-Serie bieten einerseits typische Features dieses Herstellers, wie Rekordbetriebszeiten, intuitives Bedienkonzept, integrierter Dokumentation und Freigabe. Darüber hinaus stehen jedoch auch einzigartige Innovationen zur Verfügung. So fokussiert sich dieses Gerät auf die Verbindung von noch kürzeren Betriebszeiten und damit schnellerer Verfügbarkeit der Instrumente mit der Energieeinsparung.

Optimale Sterilisationsergebnisse werden durch die patentierte Doppelmantel-Technologie erreicht.

Technische Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patentierte Trocknung DRYtelligence® mit automatischer Anpassung an die Beladung</li> <li>• 9 kg maximale Beladung</li> <li>• Halterungen für bis zu 8 Tablett</li> <li>• Intuitive Bedienung über großes Farb-Touchdisplay</li> <li>• Integrierte Software zur Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung</li> <li>• Medienboard für schnellen Zugang zu wichtigen Komponenten, z. B. der Schnittstelle für den technischen Service</li> <li>• Sleep-Modus auf Knopfdruck aktivier- und deaktivierbar für weitere Reduzierung des Strombedarfs</li> <li>• Startzeitvorwahl</li> <li>• Leitwertmessung zum Schutz der wertvollen Instrumente vor Wasser schlechter Qualität</li> <li>• Festwasseranschluss</li> <li>• Kammertiefe 45 cm</li> </ul>
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktioniertes Vor- und Nachvakuum</li> <li>• Festwasseranschluss</li> <li>• Kesselgröße Ø 25 cm x 45 cm Länge, 23 Liter Volumen</li> <li>• Maximale Beladungsmenge von 9 kg</li> </ul>
Maße	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Breite x Höhe x Tiefe) 46 cm x 50 cm x 68 cm</li> <li>• Höhe inkl. Display 56 cm</li> <li>• Gerätefüße passen auf 70 cm breite Tischplatte</li> </ul>
Gewicht	64 kg
Stromversorgung	220-240V / 50-60 Hz / 3.400 W
Bestelldaten	Vacuklav 44B+ Evolution      W20-Art.-Nr. 10040837      Hersteller: MELAG Aufstellpauschale W20 MELAG      W20-Art.-Nr. 10040021

## Zubehör für Vacuklav 44B+ Evolution

Für die Beladung des Vacuklav 44B+ Evolution steht eine Vielzahl an Zubehör zur Verfügung. So können beispielsweise MELAStore Trays vom Autoklaven aufgenommen werden. Zur Instrumentenfixierung sind verschiedene Silikonzubehöre verfügbar.

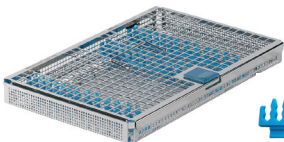

MELAStore Tray 100 - ME01181  
 Lieferung mit drei Silikonstegen für bis zu 14 Instrumente mit einer Länge von 27 cm  
 Breite: 17,6 cm x Länge: 27,5 cm x Höhe: 4,3 cm  
 1 Stück      W20-Art.-Nr. 10041643      Hersteller: MELAG